

Bains thermostatiques

BAIN DE SABLE SÉRIE BS

BAIN DE SABLE DE LABO-
RATOIRE POUVANT ÊTRE
TRANSFORMÉ EN PLAQUE
CHAUFFANTE, ADAPTÉ À
TOUS LES TYPES
D'APPLICATIONS



Bain de sable de laboratoire

Bain de sable carré pour laboratoire, pouvant être transformé en plaque chauffante. Le bain de sable thermostatique BS-3030 peut être facilement transformé en plaque chauffante. Idéal pour les incubations nécessitant un transfert de chaleur en douceur. Régulation de la température par un régulateur à impulsions d'énergie avec un contrôleur à 11 fonctions facile à utiliser.

UTILISATION PRÉVUE


- + POUR LES CAS OÙ L'HOMOGENÉITÉ EST REQUISE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES AVEC UN CHAUFFAGE DOUX
- + INDIQUÉ POUR LES MATÉRIAUX OVOÏDES LORS DES OPÉRATIONS DE SÉCHAGE ET D'ÉVACUATION



CARACTÉRISTIQUES

- Plage de températures de fonctionnement allant de 50 °C à 400 °C.
- Bac supérieur amovible qui permet de transformer l'appareil en plaque chauffante. Montage et démontage de l'équipement avec ajustement à pression.
- Bac supérieur en acier inoxydable AISI-304, non déformable.
- Plaque chauffante en céramique résistante à l'écrasement avec éléments chauffants circulaires.
- Régulation de la température par le régulateur d'impulsions énergétiques.
- Contrôle manuel de la température au moyen d'une molette à 11 fonctions facile à utiliser.
- Panneau de commande avec témoins lumineux indiquant la connexion au réseau et le fonctionnement de la plaque chauffante.

DONNÉES TECHNIQUES

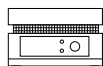


Caractéristiques

Référence	BS-3030
Plage de température de fonctionnement °C	50-400
Capacité L	4,5
Dimensions extérieures L x D x H mm	320 x 405 x 200
Dimensions de la plaque chauffante L x D mm	300 x 300
Dimensions intérieures du bac supérieur L x D x H mm	310 x 310 x 50
Puissance W	3000
Poids kg	16
Tension* V	230
Fréquence Hz	50/60

*Également disponible avec une tension de 115 V.

Évolution de la température en fonction de la position du régulateur

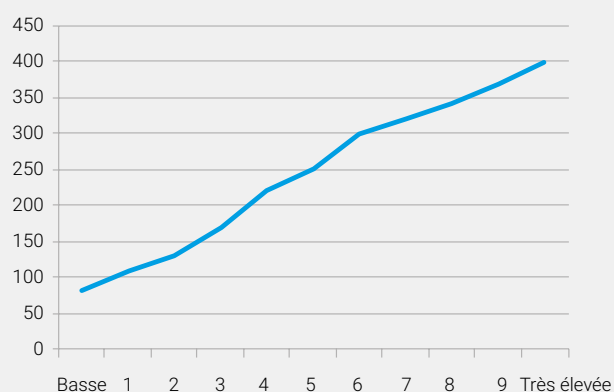

Valeurs correspondant à une température ambiante de 20 °C. La stabilité de l'équipement variera en fonction des conditions environnementales.

— Température



Détail du régulateur.

CLIQUEZ !

ACCÉDEZ À
TOUTES LES
VIDÉOS DES
PRODUITS
RAYPA

+ info

YouTube



Découvrez plus d'informations sur tous nos produits sur notre Chaîne YouTube



REV/08.2021

RAYPA

Avinguda del Vallès, 322
Pol. Ind. "Els Bellots"
08227 Terrassa (Barcelona) Espagne

raypa@raypa.com
www.raypa.com

Tél. +34 937 830 720

R. ESPINAR, S.L.